


# Info-Blatt RTP-Viewer




Zur Diagnose und für Tests von RTP-Files in der Strahlentherapie ist der RTP-Viewer konzipiert. Der Programmstart ist nur über Passwort möglich.

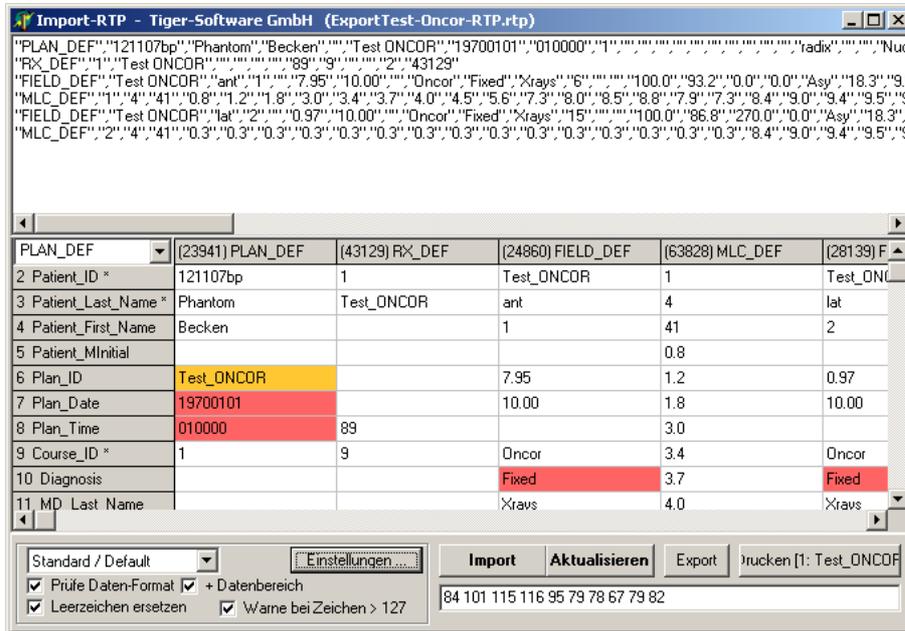

## Allgemeine Ansicht

- Funktionen:
- Überprüfung auf korrekte Checksumme (CRC-Wert)
  - Überprüfung des Datenformats
  - Leerzeichen lassen sich darstellen
  - Die entsprechende ASCII-Code wird angezeigt
  - Warnmeldung bei ASCII-Zeichen >127 (Sonderzeichen)
  - Ausdruck der ausgewählten RTP-Zeile

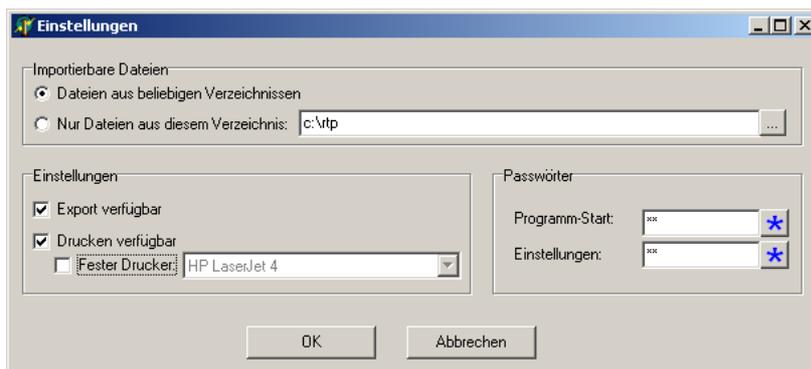

## Setup-Seite

Durch unterschiedliche Berechtigungen lässt sich der Funktionsumfang auf einfache Anzeige und den Ausdruck der RTP-Daten begrenzen.

Tiger-Software GmbH 19.04.2011 / 09:45:15  
 C:\Klinik\_Files\ \_IMRT\ExportTest-Oncor-RTP.rtp

## Ausdruck

1 Keyword *	(24860)FIELD_DEF
2 Rx_Site_Name	Test_ONCOR
3 Field_Name	ant
4 Field_ID *	1
5 Field_Note	
6 Field_Dose	7.95
7 Field_Monitor_Units	10.00
8 Wedge_Monitor_Units	
9 Treatment_Machine	Oncor
10 Treatment_Type	Fixed
11 Modality	Xrays
12 Energy	6
13 Time	

Ausschnitt vom Ausdruck der Field\_Def-Seite